

# 3-Point Products,® Inc.



Brugsanvisning - Dansk (DA)



[www.3pp-eifu.com](http://www.3pp-eifu.com)



**Beskrivelse:** En 3pp® Buddy Loop® støtter og beskytter skadede fingre.

**Intended Use:** En fleksibel anordning, der er designet til at fastgøre en skadet finger til en tilstødende finger for at beskytte, holde fingrene i korrekt position, lette bevægelse og hjælpe med heling.



**Forholdsregler:** Ikke til brug på åbne sår. Enheden kan forårsage hudirritation. Afbryd brugen, hvis der opstår irritation. Kontakt din sundhedspersonale, hvis irritationen fortsætter. Følg retningslinjerne for rengøring, og påfør regelmæssigt en ren indpakning. Diskuter med sundhedspersonalet før brug, hvis du har diabetes eller nedsat blodcirkulation.

**Anvendelse:** Sådan anvendes

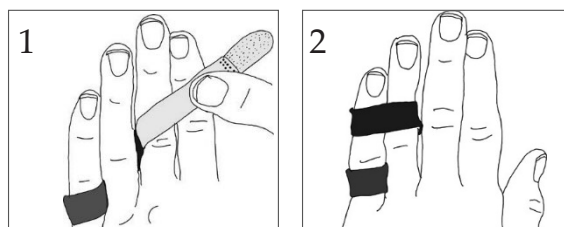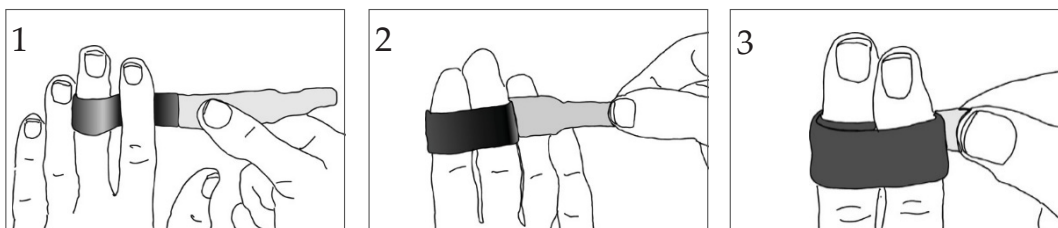

**Sådan leveres:** Produktet er fremstillet af nylon, Lycra® og skum. Materialerne er latexfri. Det fås i tre størrelser, pakket i forskellige mængder. Må ikke anvendes, hvis enheden er beskadiget. Opbevares på et køligt og tørt sted.

**Rengøring:** Vask produktet i hånden og lufttør det regelmæssigt. Påfør et rent produkt efter behov i henhold til forholdene.

**Bortskaffelse:** Produktet er beregnet til at kunne genbruges på den samme person flere gange. Kassér apparatet, hvis det viser tegn på overdreven slitage, og udskift med et nyt produkt efter behov.

**Hvornår skal man konsultere en sundhedspersonale:** Kontakt en sundhedsprofessionel, hvis du oplever en bivirkning til apparatet, herunder hudreaktion eller ændringer i tilstanden.


**Vejledning til brugeren og/eller patienten:** I tilfælde af en uønsket hændelse i forbindelse med udstyret skal du fjerne udstyret og rapportere hændelsen til distributøren og den autoriserede repræsentant i den medlemsstat, hvor brugeren er bosiddende.

**Distributører:** [www.3pp-eifu.com/#distributors](http://www.3pp-eifu.com/#distributors)

**Mærkesymboler:** Alle symboler, der anvendes på produktets etiket eller produktliteratur, er defineret i 3-Point Products Symbols Legend her: [www.3pp-eifu.com/#symbols](http://www.3pp-eifu.com/#symbols)



3-Point Products, Inc.

118 Log Canoe Circle  
Stevensville, MD 21666 USA  
[www.3pointproducts.com](http://www.3pointproducts.com)  
+001.410.604.6393 



Sallmann Medical GmbH

Alois-Stockinger-Str.16  
5020 Salzburg Østrig  
[service@sallmann-medical.eu](mailto:service@sallmann-medical.eu)



Swiss AR Services  
GmbH  
Industriestrasse 47  
CH-6300 Zug