

3-Point Products,[®] Inc.



Istruzioni per l'uso - Italiano (IT)



www.3pp-eifu.com



Descrizione: Il 3pp[®] Buddy Loop[®] supporta e protegge le dita della mano ferite.

Uso previsto: dispositivo flessibile progettato per fissare il dito della mano ferito ad uno adiacente per proteggere e mantenere le dita in corretto allineamento, facilitare il movimento e promuovere la guarigione.



Precauzioni: Non utilizzare su ferite aperte. Il prodotto può causare irritazione cutanea. Sospendere l'uso in caso di irritazione. Contattare un medico se l'irritazione persiste. Seguire le istruzioni per la pulizia e applicare un dispositivo pulito regolarmente. Consultare un medico prima dell'uso se si soffre di diabete o in caso di circolazione ridotta.

Istruzioni: Modalità di applicazione

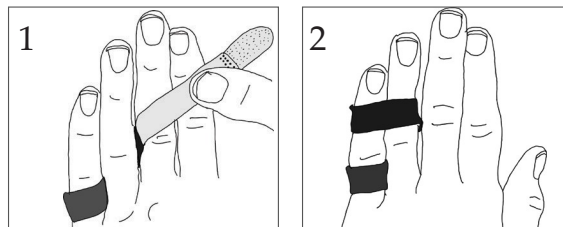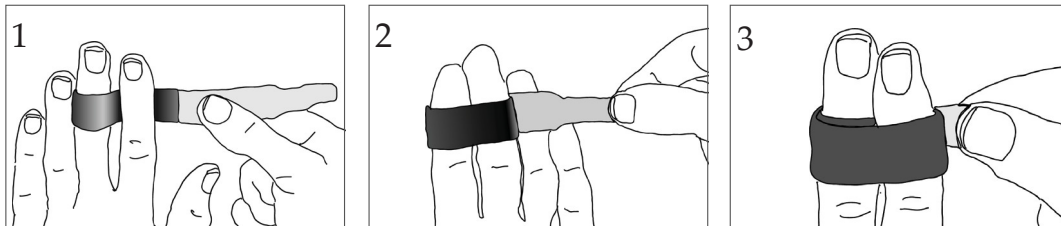

Modalità di fornitura: il prodotto è realizzato in nylon, Lycra® e gommapiuma. Materiali privi di lattice. È disponibile in tre misure e confezionato in varie quantità. Non utilizzare se il prodotto è danneggiato. Conservare in luogo fresco e asciutto.

Pulizia: lavare a mano il prodotto regolarmente e lasciarlo asciugare all'aria. Applicare un prodotto pulito secondo necessità in base alle condizioni.

Smaltimento: Il prodotto è destinato ad essere riutilizzato più volte dalla stessa persona. Eliminare il dispositivo se mostra segni di usura eccessiva e se necessario sostituirlo con un nuovo prodotto,.


Quando consultare un operatore sanitario: consultare un operatore sanitario se si verificano reazioni avverse al dispositivo, tra cui reazioni cutanee o cambiamenti nelle condizioni.

Avviso all'utente e/o al paziente: in caso di eventi avversi connessi al dispositivo, rimuovere il prodotto e segnalare l'incidente al distributore e al rappresentante autorizzato nello stato membro in cui risiede l'utente.

Distributori: www.3pp-eifu.com/#distributori

Simboli dell'etichetta: tutti i simboli utilizzati sull'etichetta e nella documentazione del prodotto sono descritti nella legenda dei simboli prodotti 3-Point disponibile sul sito: www.3pp-eifu.com/#symbols



3-Point Products, Inc.
118 Log Canoe Circle
Stevensville, MD 21666 USA
www.3pointproducts.com
+001.410.604.6393 



Sallmann Medical GmbH
Alois-Stockinger-Str.16
5020 Salsburg Austria
service@sallmann-medical.eu



Swiss AR Services GmbH
Industriestrasse 47
CH-6300 Zug