

3-Point Products,[®] Inc.



Gebruiksaanwijzing - Nederlands (NL)



www.3pp-eifu.com



Beschrijving: Een 3pp[®] Buddy Loop[®] ondersteunt en beschermt geblesseerde vingers.

Beoogd gebruik: Een flexibel hulpmiddel dat is ontworpen om een geblesseerde vinger aan een vinger ernaast te bevestigen ter bescherming, om de vingers in een correcte positie te houden, om ze makkelijker te laten bewegen en te helpen bij het herstel.



Let op: niet voor gebruik bij open wonden. Het hulpmiddel kan huidirritatie veroorzaken. Stop met het gebruik van het product indien irritatie optreedt. Neem contact op met je zorgverlener als de irritatie aanhoudt. Volg de reinigingsrichtlijnen en breng regelmatig een schone wikkel aan. Overleg voor gebruik met je zorgverlener als je diabetes of een verminderde bloedsomloop hebt.

Instructies: Hoe te gebruiken

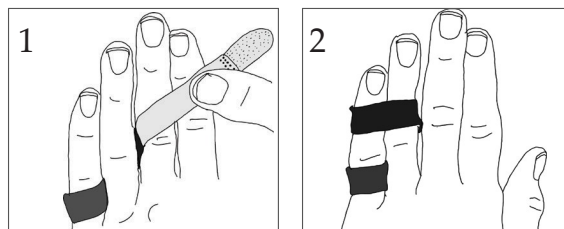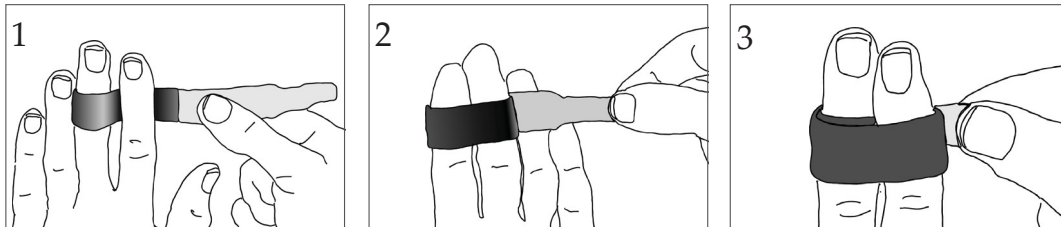

Materiaal: Het product bestaat uit nylon, Lycra® en schuim. Product bevat geen latex. Het is verkrijgbaar in drie maten en is verpakt in verschillende hoeveelheden. Niet gebruiken als het hulpmiddel beschadigd is. Bewaar op een koele, droge plek.

Reiniging: Was het product regelmatig met de hand en laat het drogen. Breng een schoon product aan wanneer nodig, afhankelijk van de diagnose.

Hergebruik: Het product kan meerdere keren door dezelfde persoon worden gebruikt. Gooi het product weg als het overmatige slijtage vertoont en vervang wanneer nodig door een nieuw product.


Wanneer moet je een medisch deskundige raadplegen: Raadpleeg een medisch deskundige bij een negatieve reactie op het product, bijvoorbeeld huidreacties of veranderingen in de aandoening.

Waarschuwing voor gebruiker en/of patient: In het geval van een negatieve ervaring met betrekking tot het hulpmiddel, verwijder het hulpmiddel en meld het incident aan de distributeur en de bevoegde vertegenwoordiger in het land waar de gebruiker woont.

Distributeurs: www.3pp-eifu.com/#distributors

Labelsymbolen: Alle symbolen die op het productetiket of in de productliteratuur worden gebruikt, worden gedefinieerd in dit overzicht van de 3-Point productsymbolen: www.3pp-eifu.com/#symbols



3-Point Products, Inc.
118 Log Canoe Circle
Stevensville, MD 21666 VS
www.3pointproducts.com
+001.410.604.6393 



Sallmann Medical GmbH
Alois-Stockinger-Str.16
5020 Salzburg Oostenrijk
service@sallmann-medical.eu



Swiss AR Services GmbH
Industriestrasse 47
CH-6300 Zug