



Instrucciones de uso - Español (ES)



www.3pp-eifu.com

Descripción: Las férulas Oval-8 para los Dedos de la Mano están hechas de un plástico moldeable diseñado para adaptarse a un dedo y sujetarlo, protegerlo y alinearlos. Están disponibles en 14 tamaños para poder adaptarse a una gran variedad de tamaños de dedos. Las Férulas para los Dedos de la Mano Oval-8 son impermeables y pueden usarse en condiciones húmedas.

Uso previsto: Las Férulas Oval-8 para los Dedos de la Mano están diseñadas para ejercer tres puntos de sujeción alrededor de un dedo y mantener el nudillo recto para prevenir o limitar su movimiento y así protegerlo y favorecer su recuperación. El producto puede usarse para tratar múltiples afecciones en los dedos, dependiendo de dónde y cómo se coloque la férula.


Precauciones: No usar en heridas abiertas. No usar si el dedo está hinchado. No usar para los dedos del pie. Este producto puede causar irritación o presión en el dedo. Suspenda su uso en caso de irritación o presión. Consultar a un médico si la irritación persiste.




Siga las pautas de limpieza con regularidad. **Precaución:** No usar con niños menores de 5 años. Puede causar asfixia si se ingiere.

Instrucciones: Cómo usar las Férulas Oval-8 para los Dedos de la Mano para diferentes afecciones de los dedos.


1. Deformidad en el ojal

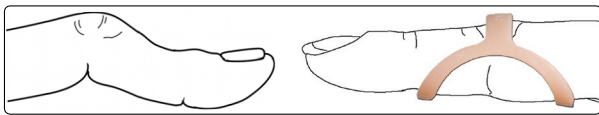


4. Dedo en martillo

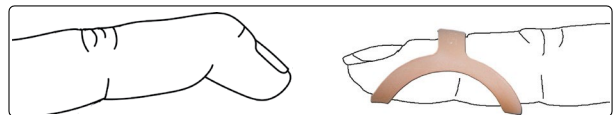


2. Dedo torcido

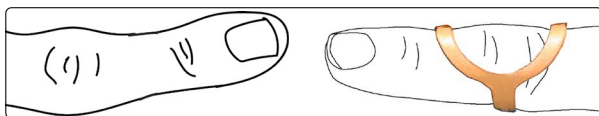


5. Deformidad en cuello de cisne

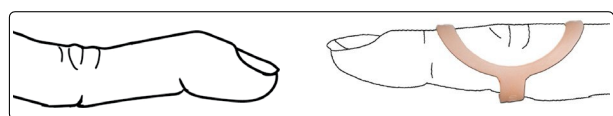



Pulgar en gatillo

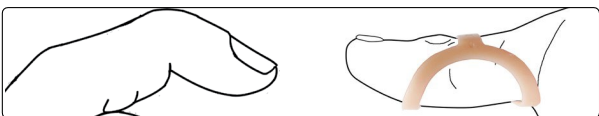

6. Dedo en gatillo

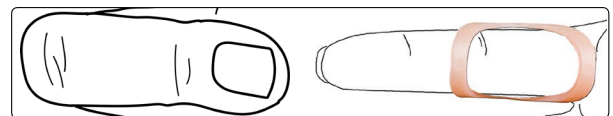

Aclaración: Las férulas Oval-8 se ajustan más o menos según el extremo que se coloque primero en el dedo.
El signo más (+) indica el extremo más suelto.

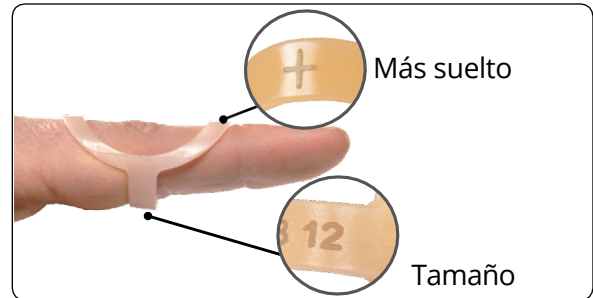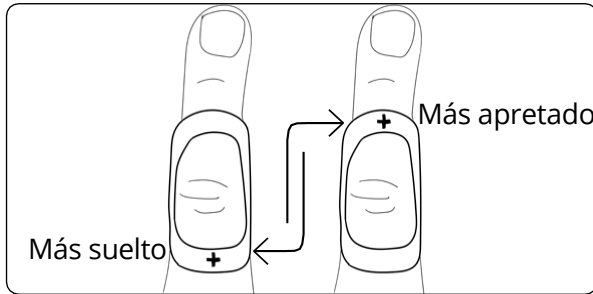

Medidas para una Férula Oval-8 para los Dedos de la Mano: Las instrucciones a seguir para medir los dedos y elegir el tamaño correcto del producto se pueden encontrar en las páginas 3 y 4.

Cómo se distribuye: El producto está fabricado con polipropileno puro. Los materiales no contienen látex. No usar el producto si está dañado. Conservar en un lugar fresco y seco. Está disponible en 14 tamaños y diferentes packs. Los packs disponibles se pueden encontrar en la página 4.

Limpieza: Lavar a mano con agua y jabón y secar el producto al aire libre con regularidad. Desinfectar el producto con alcohol isopropílico al 70 % o con una solución de lejía al 10 %.

Desechado: El producto está indicado para ser reutilizado por la misma persona varias veces. Deseche el producto si muestra signos de desgaste excesivo y reemplácelo por uno nuevo si es necesario.

Cuándo consultar al médico: Si experimenta alguna reacción adversa al usar el producto, incluidas reacciones cutáneas o cambios en la condición de la piel, consulte al médico.

Aviso al usuario y/o paciente: En caso de cualquier incidente adverso relacionado con el producto, se debe suspender su uso y comunicar el incidente al fabricante y a la autoridad competente del Estado Miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente.

Fabricante: www.3pp-eifu.com/#distributors


Símbolos de la etiqueta: Todos los símbolos utilizados en la etiqueta o documentación del producto están detallados en la Leyenda de Símbolos de 3-Point Products: www.3pp-eifu.com/#symbols



3-Point Products, Inc.
118 Log Canoe Circle
Stevensville, MD 21666 USA
www.3pointproducts.com
+001.410.604.6393



Sallmann Medical GmbH
Alois-Stockinger-Str.16
5020 Salzburg Austria
service@sallmann-medical.eu

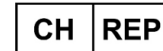

Swiss AR Services GmbH
Industriestrasse 47
CH-6300 Zug



Cómo medir su(s) dedo(s) para elegir correctamente la Férula Oval-8 para los Dedos de la Mano

La Férula Oval-8 para Dedos de la Mano es un producto de uso médico con un ajuste perfecto que generalmente proporciona los resultados más eficaces. El tamaño correcto depende de cuál sea la afección del dedo y en qué parte se vaya a usar la férula. Por favor, siga las instrucciones

Necesitará:

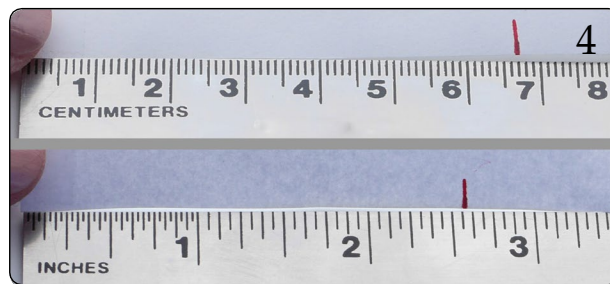
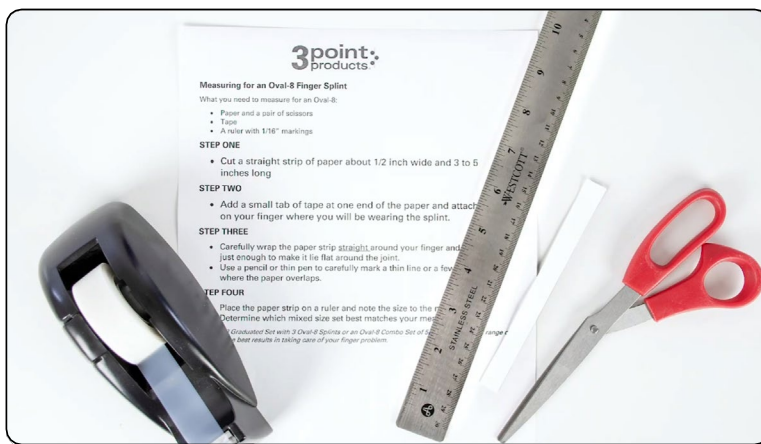




Tabla de tamaños y packs Oval-8

Tabla de tallas Oval-8 (español)		
Tamaño Oval-8	Medida en pulgadas	Medida en centímetros
2	1-3/4"	4,3
3	1-13/16"	4,5
4	1-15/16"	4,95
5	2-1/6"	5,27
6	2-3/16"	5,7
7	2-5/16"	5,86
8	2-7/16"	6,14
9	2-1/2"	6,35
10	2-11/16"	6,82
11	2-13/16"	7,09
12	2-15/16"	7,4
13	3"	7,65
14	3-3/16"	8,09
15	3-1/4"	8,2

Tabla de packs Oval-8						
Tamaño Oval-8	Una (1) por pack	Tres (3) por pack	Cinco (5) por pack	Pack graduado tres (3) tamaños	Kit Oval-8 Caja clínica con 44 férulas	Tamaño pack
2	√	√	√	2-3-4	Cantidad por talla Tamaños 2 y 15 1 Tamaño 3-4 y 13-14 2 Tamaño 11 y 12 3 Tamaño 5 y 10 4 Tamaño 6-7-8-9 5	Tamaño pack una (1) por tamaño - 14 en total 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
3	√	√	√	4-5-6		
4	√	√	√	6-7-8		
5	√	√	√	8-9-10		
6	√	√	√	10-11-12		
7	√	√	√	13-14-15		
8	√	√	√	Pack combo cinco (5) tallas 2-3-4-5-6 5-6-7-8-9 8-9-10-11-12 11-12-13-14-15		
9	√	√	√			
10	√	√	√			
11	√	√	√			
12	√	√	√			
13	√	√	√			
14	√	√	√			
15	√	√	√			
Es posible que los packs de algunos fabricantes no estén disponibles						