



## Istruzioni per l'uso - Italiano (IT)



[www.3pp-eifu.com](http://www.3pp-eifu.com)

**Descrizione:** I tutori per dita della mano Oval-8 sono un dispositivo in plastica sagomata progettato per adattarsi al dito per supporto, protezione e allineamento. Sono disponibili in 14 taglie per adattarsi a una vasta gamma di dimensioni delle dita. I tutori per dita della mano Oval-8 sono impermeabili e possono essere indossati a contatto con l'acqua.


**Destinazione d'uso:** i tutori per dita della mano Oval-8 sono progettati in modo da applicare tre punti di controllo intorno al dito e mantenere le nocche dritte, prevenire o limitare il movimento per proteggere e favorire la guarigione. Il dispositivo può essere utilizzato per gestire molteplici condizioni delle dita della mano a seconda di dove e come viene indossato.




**Precauzioni:** Non utilizzare su ferite aperte. Non utilizzare in presenza di gonfiore. Non utilizzare sulle dita dei piedi. Il dispositivo può causare irritazione o applicare pressione sul dito. Sospendere l'uso in caso di irritazione o pressione. Contattare il proprio operatore sanitario se l'irritazione persiste. Seguire regolarmente le linee guida per la pulizia. **Attenzione:** Non adatto a bambini di età inferiore ai 5 anni. Può causare soffocamento se ingerito.

**Istruzioni:** indosso dei tutori per dita della mano Oval-8 a seconda delle diverse condizioni.

1. Deformità a bottoniera

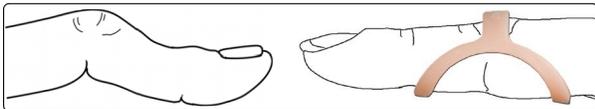


4. Dito a martello

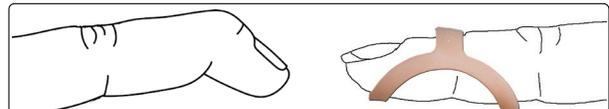


2. Dito storto




5. Deformità a collo di cigno

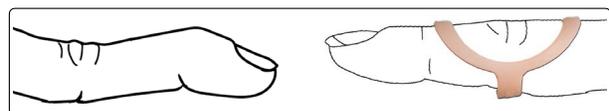

3. Pollice a scatto


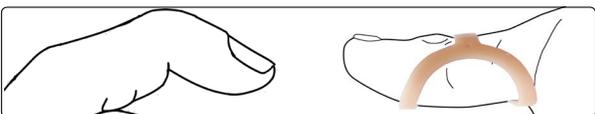


6. Dito a scatto

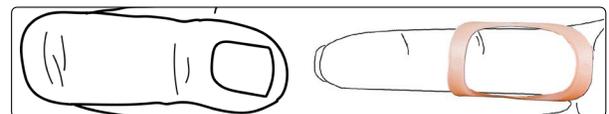

**Note:** i tutori Oval-8 hanno un indosso più stretto o più largo a seconda di quale estremità viene posizionata per prima sul dito.

Il segno più + indica l'estremità più larga.

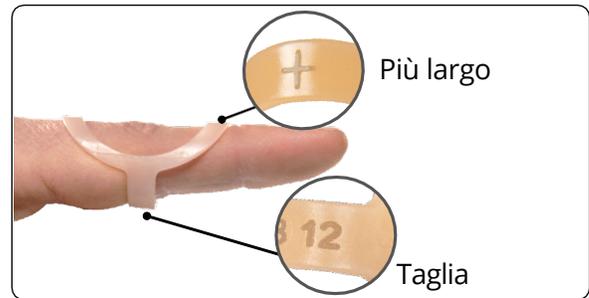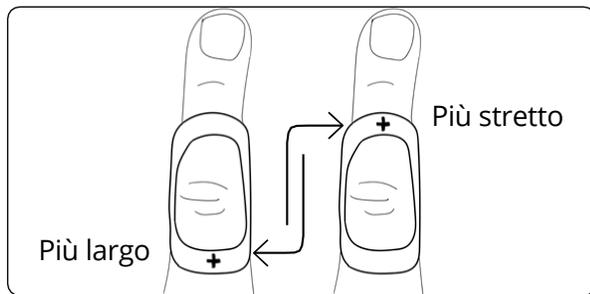

**Misurazione per indosso supporto per dita Oval-8:** le istruzioni per la misurazione delle dita della mano e la taglia corretta del prodotto sono disponibili alle pagine 3 e 4.

**Modalità di fornitura:** il prodotto è realizzato in polipropilene puro. Il prodotto è privo di lattice. Non utilizzare se il prodotto è danneggiato. Conservare in luogo fresco e asciutto. È disponibile in 14 taglie e confezionato in varie quantità. Le confezioni disponibili sono a pagina 4.

**Pulizia:** lavare a mano il prodotto regolarmente e lasciarlo asciugare all'aria. Disinfettare il prodotto con alcool isopropilico al 70% o con una soluzione di candeggina al 10%.

**Smaltimento:** Il prodotto è destinato ad essere riutilizzato più volte dalla stessa persona. Eliminare il dispositivo se mostra segni di usura eccessiva e se necessario sostituirlo con un nuovo prodotto.

**Quando consultare un operatore sanitario:** consultare un operatore sanitario se si verificano reazioni avverse al dispositivo, tra cui reazioni cutanee o cambiamenti nelle condizioni.

**Avviso all'utente e/o al paziente:** in caso di eventi avversi connessi al dispositivo, rimuovere il prodotto e segnalare l'incidente al distributore e al rappresentante autorizzato nello stato membro in cui risiede l'utente.

**Distributori:** [www.3pp-eifu.com/#distributori](http://www.3pp-eifu.com/#distributori)

**Simboli dell'etichetta:** tutti i simboli utilizzati sull'etichetta e nella documentazione del prodotto sono descritti nella legenda simboli prodotti 3-Point disponibile sul sito:

[www.3ppeifu.com/#symbols](http://www.3ppeifu.com/#symbols)

3-Point Products, Inc.



118 Log Canoe Circle  
Stevensville, MD 21666 USA  
[www.3pointproducts.com](http://www.3pointproducts.com)  
+001.410.604.6393 

Sallmann Medical GmbH



Alois-Stockinger-Str.16  
5020 Salsburg Austria  
[service@sallmann-medical.eu](mailto:service@sallmann-medical.eu)

Swiss AR Services GmbH





Industriestrasse 47  
CH-6300 Zug



## Misurazione indosso tutore per dita della mano Oval-8

I tutori per dita della mano Oval-8 sono un dispositivo medico e un indosso aderente generalmente fornisce i risultati migliori. La taglia corretta dipende dal problema del dito e dalla posizione di indosso del supporto. Si prega di seguire le istruzioni.

### Avete bisogno di:

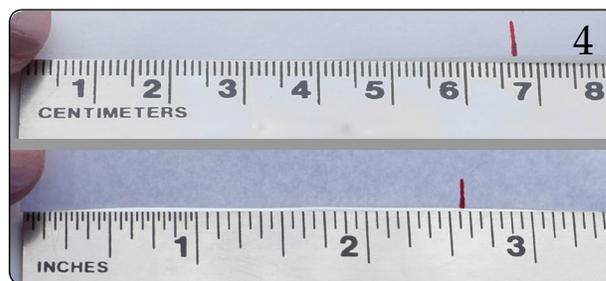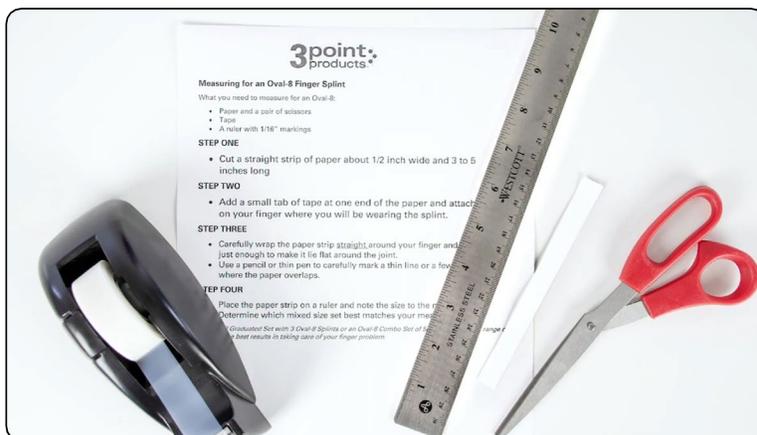



## Oval-8 Taglie e Confezioni

Oval-8 Tabella taglie (Italiano)		
Oval-8 taglie	Misure in pollici	Misure in centimetri
2	1-3/4"	4.3
3	1-13/16"	4.5
4	1-15/16"	4.95
5	2-1/6"	5.27
6	2-3/16"	5.7
7	2-5/16"	5.86
8	2-7/16"	6.14
9	2-1/2"	6.35
10	2-11/16"	6.82
11	2-13/16"	7.09
12	2-15/16"	7.4
13	3"	7.65
14	3-3/16"	8.09
15	3-1/4"	8.2

Oval-8 Tabella confezioni							
Oval-8 Taglia	Uno (1) per confezione	Tre (3) per confezione	Cinque (5) per confezione	Set graduato tre (3) taglie	Oval-8 Kit Scatola ambulatorio 44 tutori	Quantità per taglia	
2	✓	✓	✓	2-3-4	Taglia 2 e 15	1	
3	✓	✓	✓	4-5-6		Taglia 3-4 e 13-14	2
4	✓	✓	✓	6-7-8		Taglia 11 e 12	3
5	✓	✓	✓	8-9-10		Taglia 5 e 10	4
6	✓	✓	✓	10-11-12		Taglia 6-7-8-9	5
7	✓	✓	✓	13-14-15	Set di taglie Uno (1) ogni taglia- 14 T. 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15		
8	✓	✓	✓	Set assortito Cinque (5) taglie			
9	✓	✓	✓	2-3-4-5-6			
10	✓	✓	✓	5-6-7-8-9			
11	✓	✓	✓	8-9-10-11-12			
12	✓	✓	✓	11-12-13-14-15			
13	✓	✓	✓				
14	✓	✓	✓				
15	✓	✓	✓				

Non tutti i tipi di confezione potrebbero essere disponibili presso ciascun rivenditore