



Instruções de Utilização - Português (PT-PT)



www.3pp-eifu.com

Descrição: As Oval-8 Finger Splints [talas digitais] são um dispositivo plástico moldado concebido para se ajustar num dedo para suporte, proteção e alinhamento. Encontram-se disponíveis em 14 tamanhos por forma a acomodar uma diversidade de tamanhos de dedo. As Oval-8 Finger Splints [talas digitais] são impermeáveis e podem ser usadas em condições húmidas/molhadas.

Utilização prevista: As Oval-8 Finger Splints [talas digitais] são concebidas para aplicar três pontos de controlo à volta de um dedo por forma a manter uma articulação direita, prevenir ou limitar o movimento para proteção e permitir a recuperação. O dispositivo pode ser utilizado para tratar várias patologias dos dedos, dependendo de onde e como é usado no dígito.




Cuidados a ter: Não utilizar em feridas abertas. Não utilizar caso se verifique inchaço. Não utilizar nos dedos dos pés. O dispositivo pode causar irritação ou pressão no dedo. Interromper a utilização caso se verifique irritação. Contactar o seu médico se a irritação persistir.


Seguir as instruções de limpeza, regularmente. **Cuidado:** Não deve ser usado por crianças com menos de 5 anos de idade. Pode causar asfixia se ingerido.

Instruções: Como utilizar as Oval-8 Finger Splints [talas digitais] para tratar as diferentes patologias dos dedos.


1. Deformidade de Boutonnière

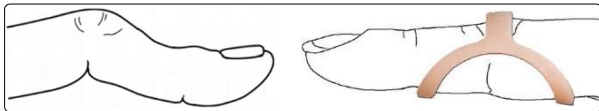


4. Dedo em martelo

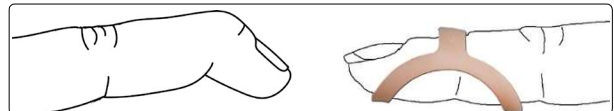


2. Dedo Torto

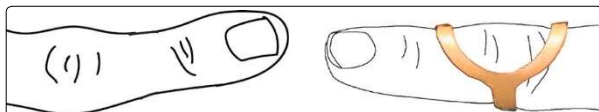


5. Deformidade em pescoço de cisne

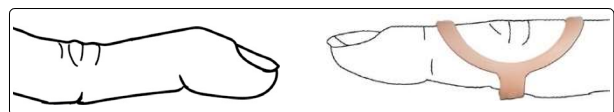



3. Dedo em gatilho/dedo em ressalto

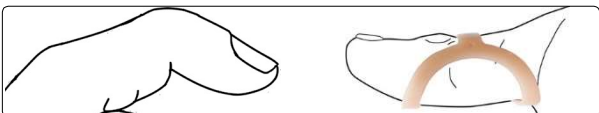

6. Dedo em gatilho

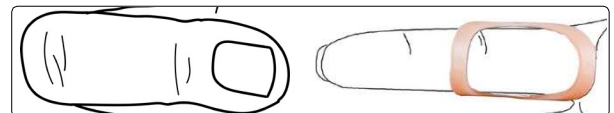

NOTA: As Oval-8 Finger Splints [talas digitais] ajustam-se mais ou menos apertadas, dependendo da extremidade em que é primeiramente colocada no dedo. O sinal de mais (+) indica a extremidade mais solta.

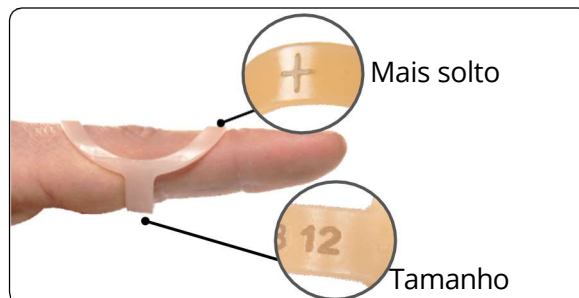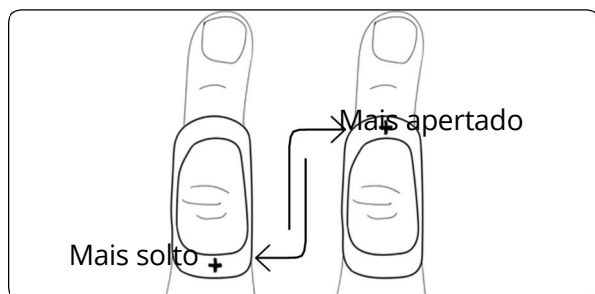

Medição para uma Oval-8 Finger Splints [talas digitais]: Nas páginas 3 e 4 podem encontrar-se as instruções para a medição dos dedos correspondente ao tamanho correto do produto.

Como é fornecido: O produto é fabricado com polipropileno puro. O produto é isento de látex. Não utilizar caso o dispositivo esteja danificado. Guardar num local fresco e seco. Encontra-se disponível em 14 tamanhos, embalado em diversas quantidades. As opções de embalagem encontram-se na página 4.

Limpeza: Lavar o produto à mão com água e sabão, e secá-lo ao ar, regularmente. Desinfetar o produto com álcool isopropílico a 70% ou com uma solução de lixívia a 10%.

Eliminação: O produto destina-se a reutilização, pela mesma pessoa, várias vezes. Eliminar o dispositivo se este mostrar sinais de desgaste excessivo e substituí-lo por um novo produto, quando necessário.


Quando consultar um médico: Consultar um médico caso sinta alguma reação adversa ao dispositivo, incluindo reação cutânea ou alterações na doença.

Informação ao utilizador e/ou doente: No caso de um evento adverso associado ao dispositivo, remover o dispositivo e comunicar o incidente ao distribuidor e ao representante autorizado no estado-membro onde o utilizador reside.

Distribuidores: www.3pp-eifu.com/#distributors

Símbolos do rótulo: Todos os símbolos utilizados no rótulo ou no folheto do produto encontram-se definidos na menção aos símbolos da ©3-Point Products: ["www.3pp-eifu.com/#symbols"](http://www.3pp-eifu.com/#symbols)

3-Point Products,® Inc.

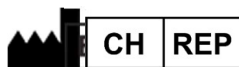

118 Log Canoe Circle
Stevensville, MD 21666 EUA
www.3pointproducts.com
+001.410.604.6393 

Sallmann Medical GmbH

Alois-Stockinger-Str.16
5020 Salzburg Áustria
service@sallmann-medical.eu

Swiss AR Services GmbH


Industriestrasse 47
CH-6300 Zurique



Medição dos seus dedos para uma Oval-8 Finger Splint [tala digital]

As Oval-8 Finger Splint [talas digitais] são um dispositivo médico e e um ajuste correto geralmente proporciona os resultados mais eficazes. O tamanho correto depende do tipo de problema que o dedo tem e de onde a banda será usada. Queira seguir as instruções

Necessitará de:

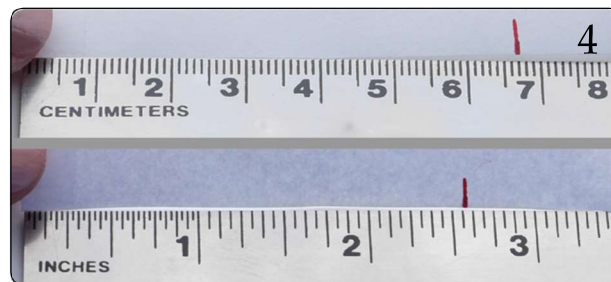



Tabelas de tamanho e de embalagem de Oval-8

Tabela de tamanho de Oval-8 (Português)		
Tamanho de Oval-8	Medição em polegadas	Medição em centímetros
2	1-3/4"	4,3
3	1-13/16"	4,5
4	1-15/16"	4,95
5	2-1/6"	5,27
6	2-3/16"	5,7
7	2-5/16"	5,86
8	2-7/16"	6,14
9	2-1/2"	6,35
10	2-11/16"	6,82
11	2-13/16"	7,09
12	2-15/16"	7,4
13	3"	7,65
14	3-3/16"	8,09
15	3-1/4"	8,2

Tabela de embalagem de Oval-8																
Tamanho de Oval-8	Um (1) por embalagem	Três (3) por embalagem	Cinco (5) por embalagem		Conjunto graduado três (3) tamanhos	Kit Oval-8 Caixa para clínicas com 44 talas Quantidade por tamanho <table><tr><td>Tamanho 2 e 15</td><td>1</td></tr><tr><td>Tamanho 3-4 e 13-14</td><td>2</td></tr><tr><td>Tamanho 11 e 12</td><td>3</td></tr><tr><td>Tamanho 5 e 10</td><td>4</td></tr><tr><td>Tamanho 6-7-8-9</td><td>5</td></tr></table>	Tamanho 2 e 15	1	Tamanho 3-4 e 13-14	2	Tamanho 11 e 12	3	Tamanho 5 e 10	4	Tamanho 6-7-8-9	5
Tamanho 2 e 15	1															
Tamanho 3-4 e 13-14	2															
Tamanho 11 e 12	3															
Tamanho 5 e 10	4															
Tamanho 6-7-8-9	5															
2	✓	✓	✓		2-3-4											
3	✓	✓	✓		4-5-6											
4	✓	✓	✓		6-7-8											
5	✓	✓	✓		8-9-10											
6	✓	✓	✓		10-11-12											
7	✓	✓	✓		13-14-15											
8	✓	✓	✓													
9	✓	✓	✓													
10	✓	✓	✓													
11	✓	✓	✓													
12	✓	✓	✓													
13	✓	✓	✓													
14	✓	✓	✓													
15	✓	✓	✓													
					Conjunto combinado cinco (5) tamanhos	Conjunto por tamanhos um (1) cada tamanho - 14 no total 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15										
					2-3-4-5-6											
					5-6-7-8-9											
					8-9-10-11-12											
					11-12-13-14-15											
Nem todas as embalagens podem estar disponíveis em todos os vendedores																

