

3-Point Products,[®] Inc.



CE

Brugsanvisning- Dansk (DA)



www.3pp-eifu.com

Description: Oval-8 Finger Splints er en formstøbt plastikanordning, der er designet til at passe på et finger for at støtte, beskytte og justere. De fås i 14 størrelser for at passe til en række forskellige fingerstørrelser. Oval-8 Finger Splints er vandtætte og kan bæres under våde forhold.


Intended Use: Oval-8 fingerskinner er designet til at anvende tre kontrolpunkter omkring et fingerled for at holde knoerne lige, forhindre eller begrænse bevægelsen for at beskytte og muliggøre heling. Enheden kan bruges til at håndtere flere forskellige fingertilstande, afhængigt af hvor og hvordan den bæres på fingeren.

Precautions: Ikke til brug på åbne sår. Ikke til brug, hvis der er hævelse. Ikke til brug på tær. Enheden kan forårsage irritation eller tryk på fingeren. Afbryd brugen, hvis der opstår irritation eller tryk. Kontakt din sundhedspersonale, hvis irritationen fortsætter. Følg retningslinjerne for rengøring regelmæssigt. **Sikring:** Må ikke bæres af børn under 5 år. Kan forårsage kvælning, hvis det sluges.




Retning: Sådan bærer du Oval-8 Finger Splints til håndtering af forskellige fingersygdomme.


1. Boutonniere Deformitet

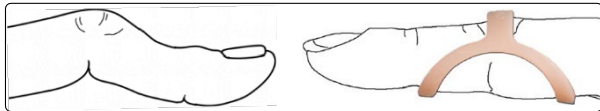


4. Mallet Finger

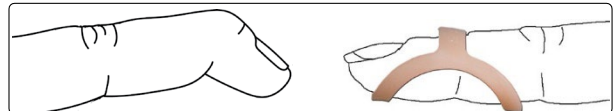


2. Skæv finger

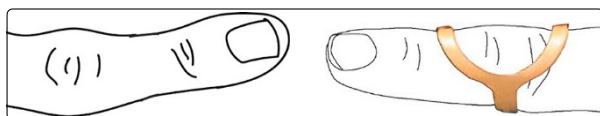


5. Svanehalsdeformitet

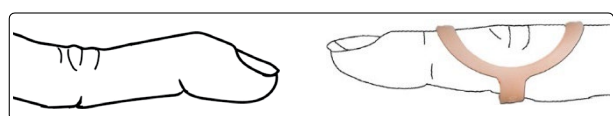


3. Trigger Thumb

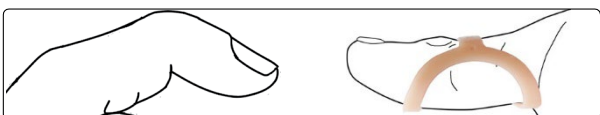


6. Trigger Finger

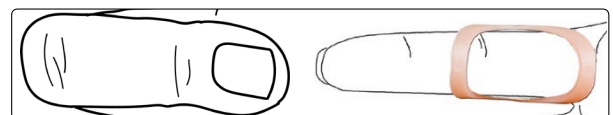

Note: Oval-8-skiner passer strammere eller løsere, afhængigt af hvilken ende der sættes på fingeren først. Plus +-tegnet angiver den løsere ende.

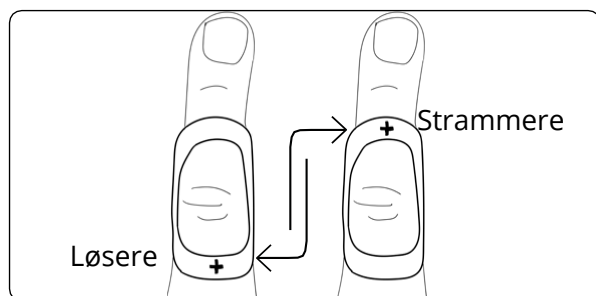

Oval-8 Beige & Clear

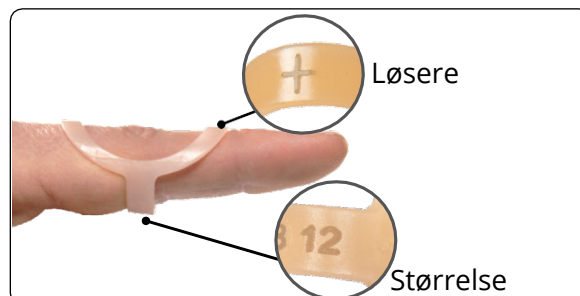

Funktioner vises i begge farver

Måling til en Oval-8 Finger Splint: Instruktioner til måling af fingre til den korrekte størrelse af produktet findes på side 3 og 4.

Hvordan leveret: Oval-8 Beige er fremstillet af ren polypropylen. Oval-8 Clear er fremstillet af copolyester. Produktet er latexfrit. Må ikke anvendes, hvis enheden er beskadiget. Opbevares på et køligt og tørt sted. Det fås i 14 størrelser, pakket i forskellige mængder. Emballeringsmulighederne findes på side 4.

Cleaning: Håndvask med sæbe og vand, og lufttør produktet regelmæssigt. Desinficer produktet med 70% isopropylalkohol eller en 10% blegemiddelopløsning.

Disposal: Produktet er beregnet til at kunne genbruges på den samme person flere gange. Kassér apparatet, hvis det viser tegn på overdreven slitage, og udskift med et nyt produkt efter behov.

Hvornår skal man konsultere en sundhedsperson: Kontakt en sundhedspersonale, hvis du oplever en bivirkning til apparatet, herunder hudreaktion eller ændringer i tilstanden.


Meddelelse til brugeren og/eller patienten: I tilfælde af en utilsigtet hændelse i forbindelse med udstyret skal udstyret fjernes og hændelsen rapporteres til distributøren og den autoriserede repræsentant i den medlemsstat, hvor brugeren er bosat.

Distributors: www.3pp-eifu.com/#distributors

Mærkningssymboler: Alle de symboler, der anvendes på produktmærket eller i produktliteraturen, er defineret i 3-Point Products Symbols Legend her: www.3pp-eifu.com/#symbols



3-Point Products, Inc.
118 Log Canoe Circle
Stevensville, MD 21666 USA
www.3pointproducts.com

+001.410.604.6393 



Sallmann Medical GmbH
Alois-Stockinger-Str.16
5020 Salzburg Østrig
service@sallmann-medical.eu






Swiss AR Services GmbH
Industriestrasse 47
CH-6300 Zug



Opmåling af din(e) finger(e) til en Oval-8 fingerskiner

Oval-8 fingerskiner er en medicinsk anordning, og en god pasform giver generelt de mest effektive resultater. Den korrekte størrelse afhænger af, hvad fingerproblemet er, og hvor båndet skal bæres. Følg venligst vejledningen

Du skal bruge:

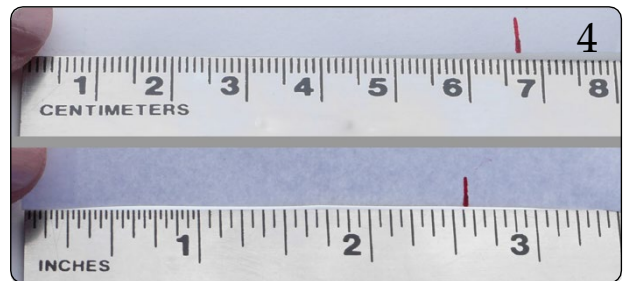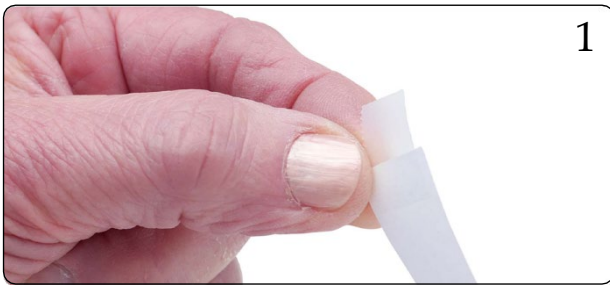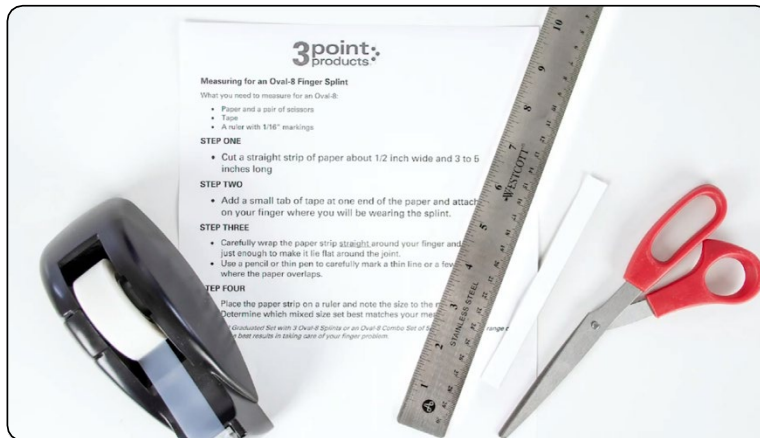



Oval-8 Størrelses- og emballeringstabeller

Størrelsesskema for Oval-8		
Oval-8 Størrelse	Mål Tommer	Måling Centimeter
2	1-3/4"	4.3
3	1-13/16"	4.5
4	1-15/16"	4.95
5	2-1/6"	5.27
6	2-3/16"	5.7
7	2-5/16"	5.86
8	2-7/16"	6.14
9	2-1/2"	6.35
10	2-11/16"	6.82
11	2-13/16"	7.09
12	2-15/16"	7.4
13	3"	7.65
14	3-3/16"	8.09
15	3-1/4"	8.2

Oval-8 Emballeringsdiagram						
Oval-8 Størrelse	En (1) per pakke	Tre (3) per pakke	Fem (5) per pakke	Pakke med flere størrelser tre (3) størrelser	Oval-8 sæt Klinikboks med 44 skinner Fås kun i beige Antal pr. størrelse	
2	✓	✓	✓	2-3-4	Størrelse 2 og 15	1
3	✓	✓	✓	4-5-6	Størrelse 3-4 og 13-14	2
4	✓	✓	✓	6-7-8	Størrelse 11 og 12	3
5	✓	✓	✓	8-9-10	Størrelse 5 og 10	4
6	✓	✓	✓	10-11-12	Størrelse 6-7-8-9	5
7	✓	✓	✓	13-14-15		
8	✓	✓	✓			
9	✓	✓	✓	Pakke med flere størrelser fem (5) størrelser	Størrelsessæt en (1) i hver størrelse - 14 i alt	
10	✓	✓	✓	2-3-4-5-6	2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15	
11	✓	✓	✓	5-6-7-8-9		
12	✓	✓	✓	8-9-10-11-12		
13	✓	✓	✓	11-12-13-14-15		
14	✓	✓	✓			
15	✓	✓	✓			

Alle pakker er muligvis ikke tilgængelige hos alle sælgere