

3-Point Products,[®] Inc.



Mode d'emploi - Français (FR)



www.3pp-eifu.com

Description : Les attelles de doigt Oval-8 sont des dispositifs en plastique moulé conçus pour soutenir, protéger et aligner les doigts. Elles sont disponibles en 14 tailles pour être compatibles avec un large éventail de tailles de doigts. Les attelles de doigt Oval-8 sont imperméables et peuvent être portées en conditions d'humidité.

Utilisation prévue : Les attelles de doigt Oval-8 sont conçues pour appliquer une pression de contrôle en trois points autour du doigt afin de garder l'articulation droite, de prévenir ou limiter le mouvement pour la protection et la guérison du doigt affecté. Le dispositif peut être utilisé pour gérer plusieurs problèmes des doigts, en fonction du placement sur le doigt.




Précautions : Ne pas utiliser sur des plaies ouvertes. Ne pas utiliser en cas d'œdème. Ne pas utiliser sur les orteils. Le dispositif peut exercer une pression ou provoquer l'irritation du doigt. Interrompre l'utilisation en cas de pression ou d'irritation. Contactez votre fournisseur de soins de santé si l'irritation persiste.

Respectez les consignes de nettoyage régulièrement.


Avertissement : Ne convient pas aux enfants de moins de 5 ans. Peut provoquer un étouffement en cas d'ingestion.

Instructions : Comment porter les attelles de doigt Oval-8 pour gérer les divers problèmes des doigts.


1. Différentielle boutonnière

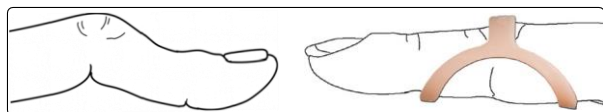


4. Doigt maillet

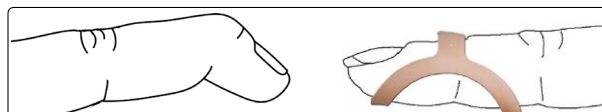


2. Doigt tordu

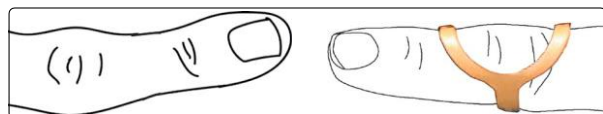


5. Différentielle du col de cygne

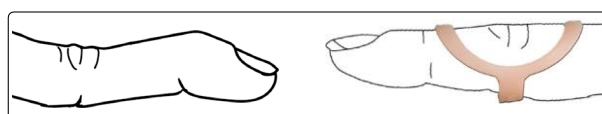


3. Pouce de déclenchement

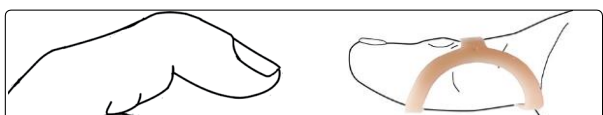


6. Doigt de déclenchement

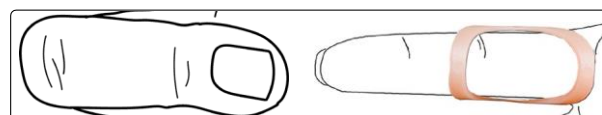

Remarque : Les attelles Oval-8 ont un ajustement plus serré ou plus lâche en fonction du bout introduit sur le doigt en premier.
Le signe + indique le bout le plus lâche.

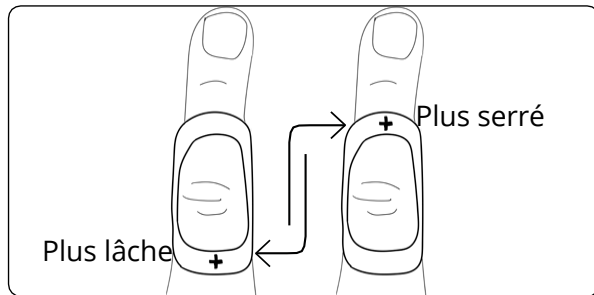

Oval-8 Beige & Transparent

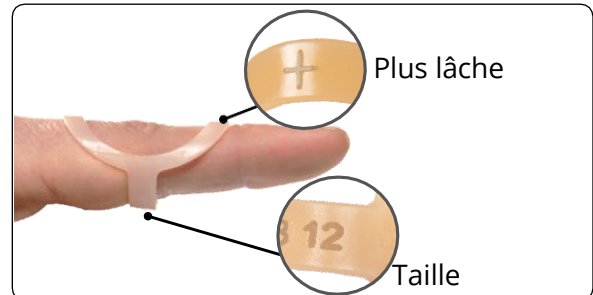

Les caractéristiques sont identiques dans les deux couleurs

Mesurer une attelle de doigt Oval-8 : Les instructions pour mesurer les doigts afin d'identifier la taille adéquate du produit à utiliser peuvent être consultées aux pages 3 et 4.

Contenu : Oval-8 Beige est fabriqué en polypropylène pure. Oval-8 Clear est fabriqué en copolyester. Le produit ne contient pas de latex. Ne pas utiliser un dispositif endommagé. Entreposer dans un endroit frais et sec. Il est disponible en 14 tailles, emballé en différentes quantités. Les options d'emballage peuvent être consultées à la page 4.

Nettoyage : Lavez à la main avec de l'eau et du savon et laissez le produit sécher à l'air régulièrement. Désinfecter le produit avec de l'alcool isopropylique concentration 70% ou avec une solution d'eau de Javel concentration 10%.

Élimination : Le produit a été conçu pour être réutilisable par la même personne. Jetez le dispositif s'il présente des signes d'usure excessive et remplacez-le avec un produit neuf, le cas échéant.

Quand devriez-vous consulter un professionnel de la santé ? Consultez un professionnel de la santé en cas de réactions indésirables au dispositif, y compris une réaction de la peau ou des changements de l'état.

Avis à l'utilisateur et/ou au patient : En cas d'incident indésirable lié au dispositif, enlevez le dispositif et rapportez l'incident au distributeur et au Représentant Autorisé de l'État Membre où réside l'utilisateur.

Distributeurs : www.3pp-eifu.com/#distributors

Symboles sur l'étiquette : Tous les symboles figurant sur l'étiquette du produit ou dans la documentation associée au produit sont définis dans la Légende des Symboles 3-Point Products à l'adresse : www.3pp-eifu.com/#symbols



3-Point Products, Inc.
118 Log Canoe Circle
Stevensville, MD 21666 USA
www.3pointproducts.com
+001.410.604.6393



Sallmann Medical GmbH
Alois-Stockinger-Str.16
5020 Salzburg Austria
service@sallmann-medical.eu





Swiss AR Services GmbH
Industriestrasse 47
CH-6300 Zug



Mesurez vos doigts pour l'ajustement d'une attelle de doigt Oval-8

Les attelles de doigt Oval-8 sont des dispositifs médicaux et un bon ajustement fournit généralement les meilleurs résultats. La taille correcte dépend du type de problème du doigt affecté et de l'emplacement où l'attelle sera portée. Veuillez respecter les instructions

Vous aurez besoin des fournitures ci-dessous :

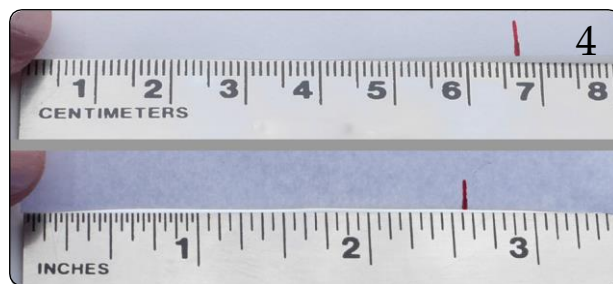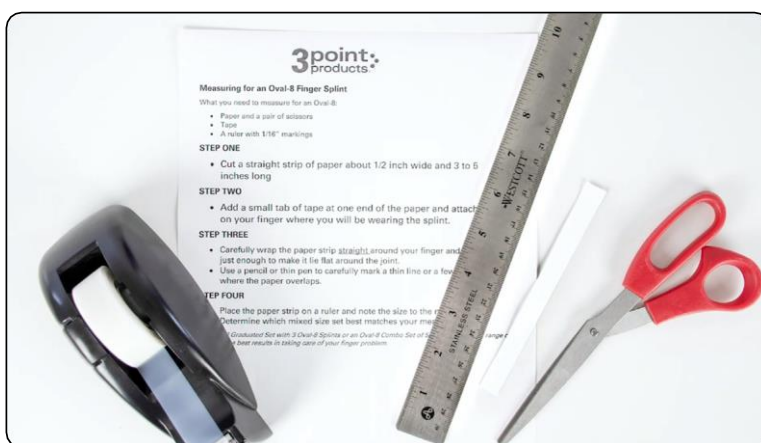



Tableaux des tailles et des emballages Oval-8

Tableau des tailles Oval-8		
Taille Oval-8	Mesure en pouces	Mesure en centimètres
2	1-3/4"	4,3
3	1-13/16"	4,5
4	1-15/16"	4,95
5	2-1/6"	5,27
6	2-3/16"	5,7
7	2-5/16"	5,86
8	2-7/16"	6,14
9	2-1/2"	6,35
10	2-11/16"	6,82
11	2-13/16"	7,09
12	2-15/16"	7,4
13	3"	7,65
14	3-3/16"	8,09
15	3-1/4"	8,2

Tableau des emballages Oval-8						
Taille Oval-8	Un (1) par paquet	Trois (3) par paquet	Cinq (5) par paquet	Paquet multi-tailles trois (3) tailles	Paquet multi-tailles cinq (5) tailles	Kit Oval-8 Boîtier de clinique avec 44 attelles Uniquement disponible en beige
2	✓	✓	✓	2-3-4		Quantité par taille Tailles 2 & 15 1
3	✓	✓	✓	4-5-6		
4	✓	✓	✓	6-7-8		Tailles 3-4 & 13-14 2
5	✓	✓	✓	8-9-10		Tailles 11 & 12 3
6	✓	✓	✓	10-11-12		Tailles 5 & 10 4
7	✓	✓	✓	13-14-15		Tailles 6-7-8-9 5
8	✓	✓	✓			
9	✓	✓	✓			
10	✓	✓	✓			
11	✓	✓	✓			
12	✓	✓	✓			
13	✓	✓	✓			
14	✓	✓	✓			
15	✓	✓	✓			
						Jeu de tailles un (1) de chaque taille - 14 au total 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
Les revendeurs peuvent ne pas avoir tous les paquets en stock						