



Gebruiksaanwijzing - Nederlands (NL)



www.3pp-eifu.com

Beschrijving: Oval-8 vingerspalken zijn gegoten plastic hulpmiddelen die ontworpen zijn om op een vinger te passen voor ondersteuning, bescherming en juiste positionering. Ze zijn verkrijgbaar in 14 maten voor verschillende vingermaten. Oval-8 vingerspalken zijn waterdicht en kunnen in natte omstandigheden gedragen worden.

Beoogd gebruik: Oval-8 vingerspalken zijn ontworpen om drie controlepunten op een vinger te plaatsen en daarmee een knokkel recht te houden, beweging te voorkomen of te beperken ter bescherming en genezing te bevorderen. Het hulpmiddel kan gebruikt worden om meerdere vingerandoeningen te behandelen, afhankelijk van waar en hoe het op de vinger wordt geplaatst.


Let op: niet voor gebruik bij open wonden. Niet gebruiken bij zwellingen. Niet gebruiken voor tenen. Het hulpmiddel kan irritatie of druk op de vinger veroorzaken. Stop met gebruik indien irritatie of druk optreedt. Neem contact op met je zorgverlener als de irritatie aanhoudt.




Volg de reinigingsrichtlijnen regelmatig. **Let op:** Niet gebruiken voor kinderen jonger dan 5 jaar. Kan verstikking veroorzaken als het wordt ingeslikt.

Instructie: Hoe draag je Oval-8 vingerspalken ter behandeling van verschillende vingerandoeningen.


1. Knoopsgatmisvorming

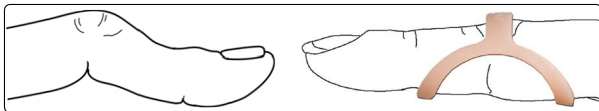


4. Mallet vinger

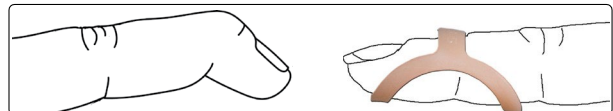


2. Kromme vinger

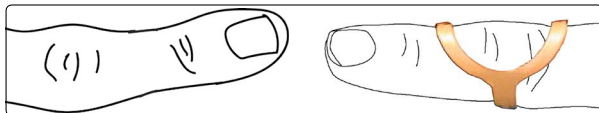


5. Zwanenhals misvorming

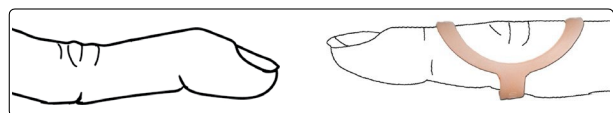


3. Triggerduim

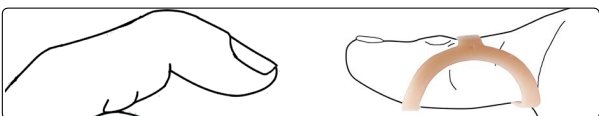


6. Triggervinger

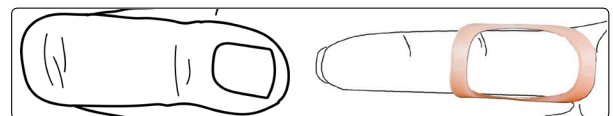

Opmerking: Oval-8 spalken passen strakker of losser, afhankelijk van welk uiteinde het eerst op de vinger wordt geplaatst. Het plus + teken geeft het lossere eind aan.

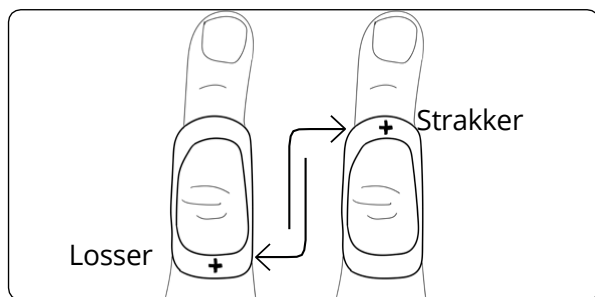

Oval-8 Beige & Clear

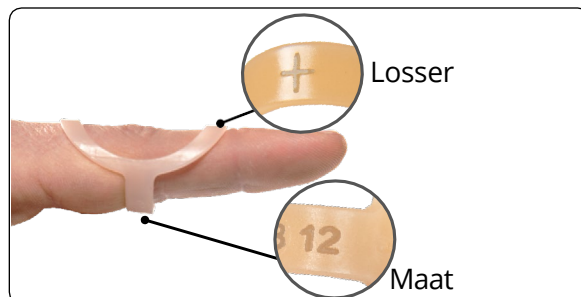

Eigenschappen gelden voor beide kleuren

Opmeten voor een Oval-8 vingerspalk: Instructies voor het meten van vingers voor de juiste maat van het product vind je op pagina 3 & 4.

Materiaal: Oval-8 Beige bestaat uit puur polypropyleen. Oval-8 Clear is gemaakt van copolyester. Het product bevat geen latex. Niet gebruiken als het hulpmiddel beschadigd is. Bewaar op een koele, droge plek. Het is verkrijgbaar in 14 maten en is verpakt in verschillende hoeveelheden. De verpakkingsopties staan op pagina 4.

Reiniging: Was het product regelmatig met de hand, met water en zeep en laat het drogen. Desinfecteer het product met 70% isopropylalcohol of een 10% bleekoplossing.

Hergebruik: Het product kan meerdere keren door dezelfde persoon worden gebruikt. Gooi het product weg als het overmatige slijtage vertoont en vervang wanneer nodig door een nieuw product.


Wanneer moet je een medisch deskundige raadplegen: Raadpleeg een medisch deskundige bij een negatieve reactie op het product, bijvoorbeeld huidreacties of veranderingen in de aandoening.

Waarschuwing voor gebruiker en/of patient: In het geval van een negatieve ervaring met betrekking tot het hulpmiddel, verwijder het hulpmiddel en meld het incident aan de distributeur en de bevoegde vertegenwoordiger in het land waar de gebruiker woont.

Distributeurs: www.3pp-eifu.com/#distributors

Labelsymbolen: Alle symbolen die op het productetiket of in de productliteratuur worden gebruikt worden gedefinieerd in dit overzicht van de 3-Point productsymbolen: www.3pp-eifu.com/#symbols



3-Point Products, Inc.
118 Log Canoe Circle
Stevensville, MD 21666 VS
www.3pointproducts.com
+001.410.604.6393 



Sallmann Medical GmbH
Alois-Stockinger-Str.16
5020 Salzburg Oostenrijk
service@sallmann-medical.eu




Swiss AR Services GmbH
Industriestrasse 47
CH-6300 Zug



Je vinger(s) meten voor een Oval-8 vingerspalk

Oval-8 vingerspalken zijn een medisch hulpmiddel en een goede pasvorm geeft over het algemeen de meest effectieve resultaten. De juiste maat hangt af van wat het vingerprobleem is en waar de band zal worden gedragen. Volg de instructies

Dit heb je nodig:

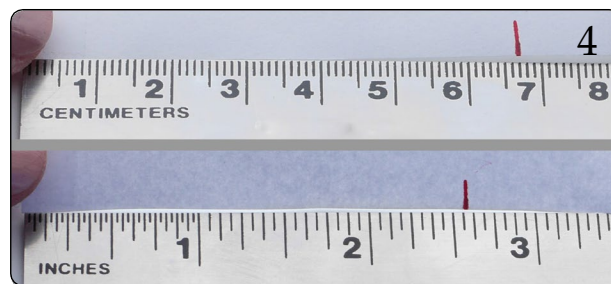



Oval-8 maat- en verpakkingstabellen

Oval-8 maattabel		
Oval-8 maat	Afmeting in inches	Afmeting in centimeters
2	1-3/4 "	4,3
3	1-13/16 "	4,5
4	1-15/16 "	4,95
5	2-1/6 "	5,27
6	2-3/16 "	5,7
7	2-5/16 "	5,86
8	2-7/16 "	6,14
9	2-1/2 "	6,35
10	2-11/16 "	6,82
11	2-13/16 "	7,09
12	2-15/16 "	7,4
13	3"	7,65
14	3-3/16 "	8,09
15	3-1/4 "	8,2

Oval-8 verpakkingstabel						
Oval-8 maat	Eén (1) per verpakking	Drie (3) per verpakking	Vijf (5) per verpakking	Verpakking met meerdere maten drie (3) maten	Oval-8 kit Kliniekdoos met 44 spalken Alleen verkrijgbaar in beige Hoeveelheid per maat	Alle-maten-set één (1) van elke maat - 14 totaal
2	✓	✓	✓	2-3-4	Maat 2 & 15	1
3	✓	✓	✓	4-5-6	Maat 3-4 & 13-14	2
4	✓	✓	✓	6-7-8	Maat 11 & 12	3
5	✓	✓	✓	8-9-10	Maat 5 & 10	4
6	✓	✓	✓	10-11-12	Maat 6-7-8-9	5
7	✓	✓	✓	13-14-15		
8	✓	✓	✓			
9	✓	✓	✓			
10	✓	✓	✓	Verpakking met meerdere maten vijf (5) maten		
11	✓	✓	✓	2-3-4-5-6		
12	✓	✓	✓	5-6-7-8-9		
13	✓	✓	✓	8-9-10-11-12		
14	✓	✓	✓	11-12-13-14-15		
15	✓	✓	✓			
Het is mogelijk dat niet alle pakketten bij alle verkopers verkrijgbaar zijn						