



## Instruções de Utilização - Português (PT)



www.3pp-eifu.com

**Descrição:** As Oval-8 Finger Splints [talas digitais] são um dispositivo plástico moldado concebido para se ajustar num dedo para suporte, proteção e alinhamento. Encontram-se disponíveis em 14 tamanhos por forma a acomodar uma diversidade de tamanhos de dedo. As Oval-8 Finger Splints [talas digitais] são impermeáveis e podem ser usadas em condições húmidas/molhadas.

**Utilização prevista:** As Oval-8 Finger Splints [talas digitais] são concebidas para aplicar três pontos de controlo à volta de um dedo por forma a manter uma articulação direita, prevenir ou limitar o movimento para proteção e permitir a recuperação. O dispositivo pode ser utilizado para tratar várias patologias dos dedos, dependendo de onde e como é usado no dígito.




**Cuidados a ter:** Não utilizar em feridas abertas. Não utilizar caso se verifique inchaço. Não utilizar nos dedos dos pés. O dispositivo pode causar irritação ou pressão no dedo. Interromper a utilização caso se verifique irritação. Contactar o seu médico se a irritação persistir.


Seguir as instruções de limpeza, regularmente. **Cuidado:** Não deve ser usado por crianças com menos de 5 anos de idade. Pode causar asfixia se ingerido.

**Instruções:** Como utilizar as Oval-8 Finger Splints [talas digitais] para tratar as diferentes patologias dos dedos.


1. Deformidade de Boutonnière

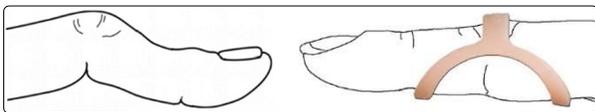


4. Dedo em martelo

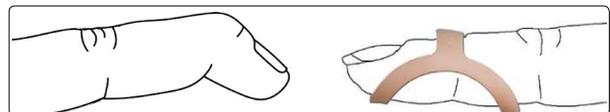


2. Dedo Torto

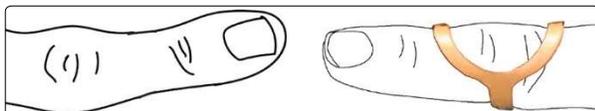


5. Deformidade em pescoço de cisne

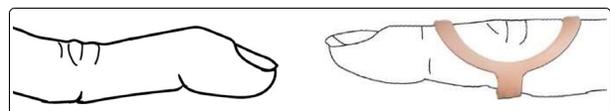


3. Dedo em gatilho/dedo em ressalto

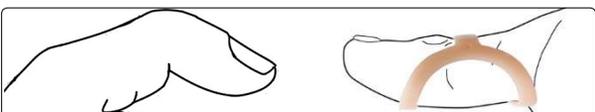

6. Dedo em gatilho

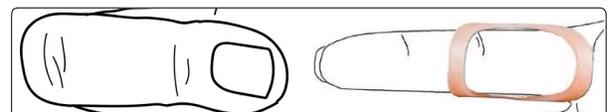

**NOTA:** As Oval-8 Finger Splints [talas digitais] ajustam-se mais ou menos apertadas, dependendo da extremidade em que é primeiramente colocada no dedo. O sinal de mais (+) indica a extremidade mais solta.

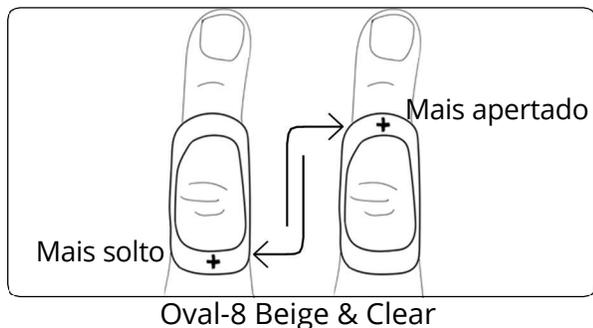

**Medição para uma Oval-8 Finger Splints [talas digitais]:** Nas páginas 3 e 4 podem encontrar-se as instruções para a medição dos dedos correspondente ao tamanho correto do produto.

**Como é fornecido:** Oval-8 Beige é fabricado com polipropileno puro. Oval-8 Clear são fabricados em copoliéster. O produto é isento de látex. Não utilizar caso o dispositivo esteja danificado. Guardar num local fresco e seco. Encontra-se disponível em 14 tamanhos, embalado em diversas quantidades. As opções de embalagem encontram-se na página 4.

**Limpeza:** Lavar o produto à mão com água e sabão, e secá-lo ao ar regularmente. Desinfetar o produto com álcool isopropílico a 70% ou com uma solução de lixívia a 10%.

**Eliminação:** O produto destina-se a reutilização, pela mesma pessoa, várias vezes. Eliminar o dispositivo se este mostrar sinais de desgaste excessivo e substituí-lo por um novo produto, quando necessário.

**Quando consultar um médico:** Consultar um médico caso sinta alguma reação adversa ao dispositivo, incluindo reação cutânea ou alterações na doença.

**Informação ao utilizador e/ou doente:** No caso de um evento adverso associado ao dispositivo, remover o dispositivo e comunicar o incidente ao distribuidor e ao representante autorizado no estado-membro onde o utilizador reside.

**Distribuidores:** [www.3pp-eifu.com/#distributors](http://www.3pp-eifu.com/#distributors)

**Símbolos do rótulo:** Todos os símbolos utilizados no rótulo ou no folheto do produto encontram-se definidos na menção aos símbolos da ©3-Point Products: "[www.3pp-eifu.com/#symbols](http://www.3pp-eifu.com/#symbols)"



3-Point Products,® Inc.  
118 Log Canoe Circle  
Stevensville, MD 21666 EUA  
[www.3pointproducts.com](http://www.3pointproducts.com)  
+001.410.604.6393 



Sallmann Medical GmbH  
Alois-Stockinger-Str.16 5020  
Salzburg Áustria  
[service@sallmann-medical.eu](mailto:service@sallmann-medical.eu)





Swiss AR Services GmbH  
Industriestrasse 47  
CH-6300 Zurique



## Medição dos seus dedos para uma Oval-8 Finger Splint [tala digital]

As Oval-8 Finger Splint [talas digitais] são um dispositivo médico e e um ajuste correto geralmente proporciona os resultados mais eficazes. O tamanho correto depende do tipo de problema que o dedo tem e de onde a banda será usada. Queira seguir as instruções

### Necessitará de:

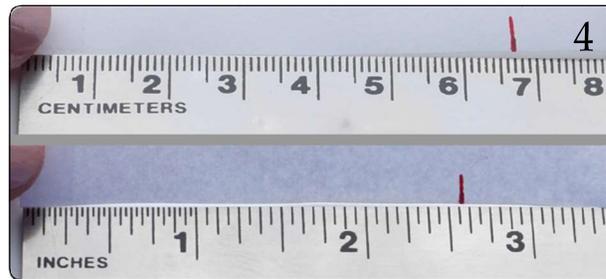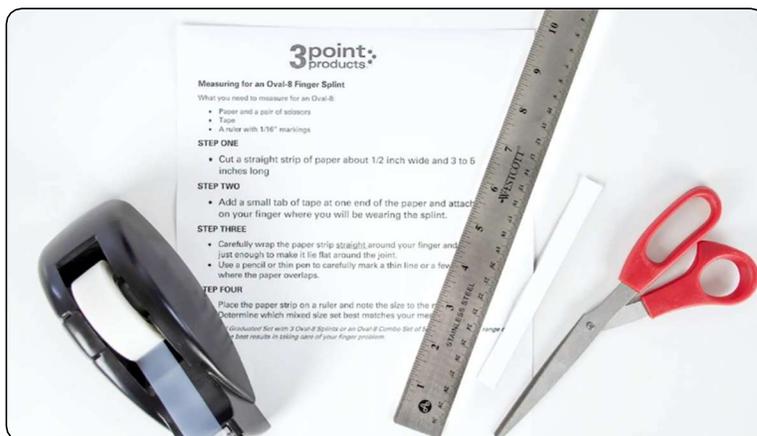



## Tabelas de tamanho e de embalagem de Oval-8

Tabela de tamanho de Oval-8		
Tamanho de Oval-8	Medição em polegadas	Medição em centímetros
2	1-3/4"	4,3
3	1-13/16"	4,5
4	1-15/16"	4,95
5	2-1/6"	5,27
6	2-3/16"	5,7
7	2-5/16"	5,86
8	2-7/16"	6,14
9	2-1/2"	6,35
10	2-11/16"	6,82
11	2-13/16"	7,09
12	2-15/16"	7,4
13	3"	7,65
14	3-3/16"	8,09
15	3-1/4"	8,2

Tabela de embalagem de Oval-8					
Tamanho de Oval-8	Um (1) por embalagem	Três (3) por embalagem	Cinco (5) por embalagem	Tamanhos diferentes três (3) tamanhos	Kit Oval-8 Caixa para clínicas com 44 talas Disponível apenas em bege Quantidade por tamanho
2	✓	✓	✓	2-3-4	Tamanho 2 e 15   1
3	✓	✓	✓	4-5-6	Tamanho 3-4 e 13-14   2
4	✓	✓	✓	6-7-8	Tamanho 11 e 12   3
5	✓	✓	✓	8-9-10	Tamanho 5 e 10   4
6	✓	✓	✓	10-11-12	Tamanho 6-7-8-9   5
7	✓	✓	✓	13-14-15	
8	✓	✓	✓		
9	✓	✓	✓	Tamanhos diferentes cinco (5) tamanhos	Conjunto por tamanhos um (1) cada tamanho - 14 no total
10	✓	✓	✓	2-3-4-5-6	2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
11	✓	✓	✓	5-6-7-8-9	
12	✓	✓	✓	8-9-10-11-12	
13	✓	✓	✓	11-12-13-14-15	
14	✓	✓	✓		
15	✓	✓	✓		
Nem todas as embalagens podem estar disponíveis em todos os vendedores					